


LES ALIGNEURS DENTALIGN

Le traitement orthodontique invisible DO-align est destiné à corriger les malpositions dentaires afin de retrouver un alignement harmonieux et fonctionnel chez l'adolescent et l'adulte

Les aligneurs DO-Align :

- Esthétiques, lisses et transparents
- Amovibles
- Polis et confortables
- Garantissent une meilleure hygiène bucco-dentaire
- Offrent des résultats de traitement prévisibles

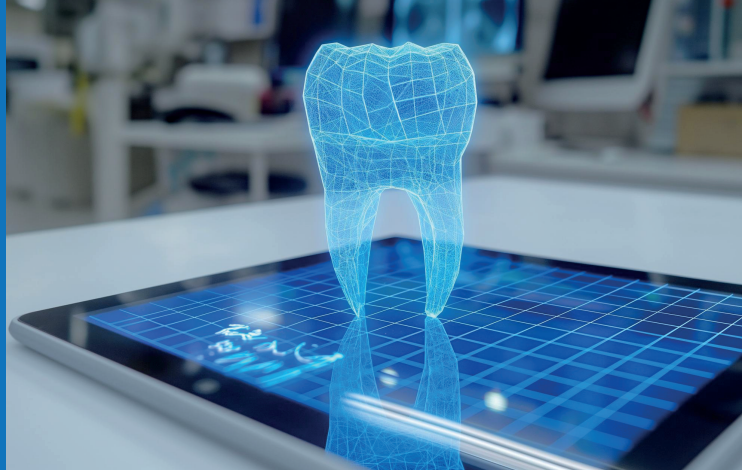

DIGITALORTHO

DIGITALORTHO

le numérique à votre service

DigitalOrtho est un laboratoire d'orthodontie exclusive et d'orthopédie dentofaciale localisé à Rabat.

Equipé par une dernière génération des machines numériques d'impression 3D haute résolution.

Notre laboratoire vous propose une large gamme de prestations d'impression 3D biocompatible à la conformité :

- l'impression 3D des modèles dentaires.
- Simulation des cas cliniques dentaires.
- Conception et impression des Gouttières Chirurgicales pour Chirurgie Orthognathique
- Appareillage anti ronflement.
- Réalisation du traitement orthodontique par aligneurs invisibles



1 RUE TAYEB LABSIR, BUREAU 4, AGDAL RABAT



TEL : +212 6 17 221 221 / +212 661 689 159



LES ETAPES DE TRAITEMENT PAR DENTALIGN

- Réception des empreintes (physiques ou optiques).
- Elaboration d'un plan de traitement personnalisé pour chaque patient .
- Accompagnement du plan de traitement par une vidéo avant / après.
- Après validation du plan de traitement par l'orthodontiste, une série d'aligneurs transparents DO-ALIGN® sera conçue, imprimée et livrée.

LA QUALITE DE NOS ALIGNEURS INVISIBLES

Afin de satisfaire vos patients nos aligneurs vous garantissent :

- Une coupe suivant le collet.
- Un polissage parfaits des bords
- Une Epaisseur de gouttière : 0,8 mm (Des épaisseurs de 0,6 et 1 mm pourront également être proposées par vous)

STRIPPING

- Pour préserver l'émail de vos patients, les strippings sont limités à 0,3 mm par face.

INDICATIONS DE DENTALIGN



Diastèmes



Overjet



Supraclusion



Articulé croisé



Béance



Encombrement

Nos aligneurs DO-align® assurent un ajustement parfaits aux dents du patient afin qu'elles exercent des forces mécaniques douces, constantes et particulièrement faibles.

Chaque gouttière va permettre d'initier un mouvement d'une ou de plusieurs dents jusqu'à atteindre la position souhaitée.

Les aligneurs sont conçus pour appliquer la force adéquate au bon endroit et au bon moment

Translation possible :
0,25 mm à chaque
gouttière

Rotation possible :
1-2° à chaque
gouttière

Force appliquée
par les
gouttières

- L'utilisation des taquets qui sont généralement nécessaires pour transmettre les forces exercées par les aligneurs de manière plus ciblée sur les dents difficiles à positionner.

Les taquets DO-align® préformés améliorent l'efficacité des mouvements dentaires et sont intégrés dans les aligneurs de transfert.

